



聽血管聲音的測量方法為…

使用壓脈帶纏繞在上臂加壓充氣，使得壓力將動脈擠壓達到完全阻止血液的流動，接著緩慢的洩放壓力，血流通過時血管聲音會產生變化，一開始聽到的血管聲音，觀察血壓計數值稱為收縮壓，當壓力逐漸洩放使得血管通道恢復正常，血管聲音逐漸消失，此時觀察血壓計數值稱為舒張壓。醫生或護士會將受檢者上臂纏繞壓脈帶，並在動脈上放置聽診器的測量方法。本產品使用上述相同方法測量血壓。

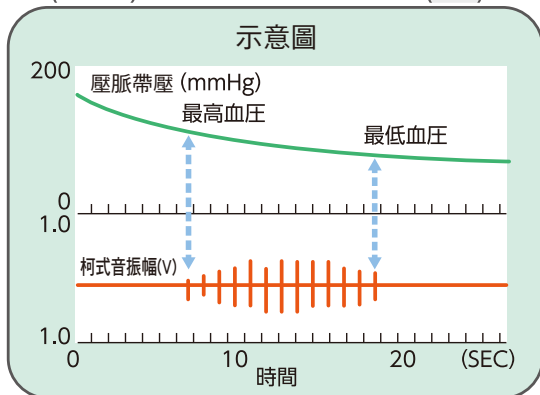

銷售名稱	TERUMO 電子血壓計 P2020
型式	ES -P2020
型號	ES -P2020ZZ
外形尺寸	本體：寬 170mm×長 177mm×高 229mm
可測定臂圍	約 18~33cm(新生兒 嬰幼兒 兒童 (15 歲以下 除外))
質量	本體：約 885g(電池除外)
測定範圍	壓力：0-299mmHg 脈搏：30-160 次/分
精度	壓力：±3mmHg 以內 脈搏：±5%以內
測定方式	聽診法
電源	DC6 V(使用 3 號(AA)鹼性乾電池時) AC110V 50-60Hz (使用專用 AC 插頭型號：XX -ES353 時 X 另售)
作動模式	連續動作 (從開始到結束動作一連串之機器的分類。)
耗電	9W(使用 3 號(AA) 鹼性乾電池時) 25VA (使用專用 AC 插頭 3A-123WU06 時 X 另售)
使用次數	使用全新 3 號(AA)鹼性乾電池時：可連續使用約 250 次 (加壓 180mmHg、周圍溫度 23°C、臂圍 25.5cm)
使用條件	溫度：10-40°C 濕度：15-85%RH (但不結露) 氣壓：700-1060hPa
保管條件	溫度：-20-60°C 濕度：10-95%RH (但不結露) 氣壓：700-1060hPa
電極保護	內部電源機器 BF 型安裝部 (使用乾電池時) 等級 II BF 型安裝部 (使用專用 AC 插頭型號：XX-ES353 時) (另售)
耐用期間	5 年或 30,000 次 (自我認證)
附屬品	變壓器 (型號：XX-ES353) 使用說明書 / 品質保證書、3 號(AA)乾電池 4 顆 (試用電池)

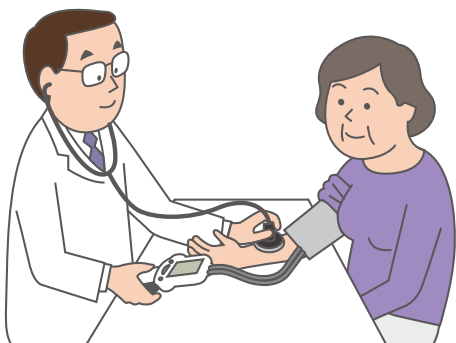

藥商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司
藥商地址：台北市松山區敦化北路 170 號 7 樓

總代理



代理商名稱：杏豐實業股份有限公司
代理商地址：新北市三重區重新路五段609巷10號4樓

代理商電話：(02)6635-8858

衛部醫器陸輸字第001129號
北市衛器廣字第109080097號


“泰爾茂” 電子血壓計 ES-P2020ZZ

無須纏繞壓脈帶 一鍵簡單測量

跟醫生、護士測量方法相同，
採用聽診法測量方式



建議售價：

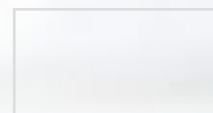

左右都可正確測量


無論是左臂還是右臂，在兩側的都有高感度麥克風可測量血管聲音。



雜音感應器

附有雜音感應器，可除去震動等雜音，正確測量血管聲音。

高感度麥克風

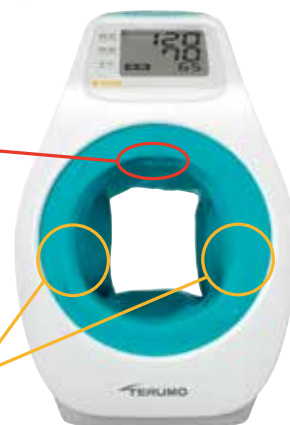

大文字液晶畫面

傾斜角度約20度的大文字液晶畫面，數值清楚閱讀方便



簡單

僅需將手臂伸入即可測量

確實

可避免因不當纏繞壓脈帶而引起測量上的錯誤

體動符號

測量時手臂或身體晃動時，會閃爍體動符號。



當符號閃爍時，請重新測量。

自動關閉電源

閒置超過2分鐘時，電源會自動關閉

- 連續使用次數 約250次
- 附測試用鹼性電池3號電池4顆
- 可另接AC變壓器(選購)

只須穿入手臂的 泰爾茂電子血壓計P2020

隧道式 手臂插入式 血壓計

